RehaPro

Anatomic SITT™

Support Pro

Maintien
universel 2022





Nous fabriquons la gamme Support depuis le début des années 90, ce qui nous a apporté une solide connaissance des problèmes de positionnement. Un tronc bien positionné est indispensable à nos utilisateurs pour un meilleur contrôle de la tête, la respiration, la mobilité et, surtout, le confort.

Ceintures de bassin
Nous proposons différents types de ceintures de bassin selon les besoins de l'utilisateur, à 2 ou 4 points de fixation.



Harnais thoraciques
Nous proposons plusieurs types de harnais et de sangles thoraciques, adaptés à différents besoins, qui assurent tous le contrôle postural.



Maintien de cheville
Une excellente façon de positionner les pieds. Se fixe facilement sur la palette.



Sangle de pied
Une façon simple de positionner les pieds, fixée sur la palette. Avec ou sans rembourrage.




Bracelet
Pour positionner les bras et éviter l'hyperextension. Le bracelet se monte en diagonale pour un meilleur effet.



Manchette de main
La manchette de main s'utilise lorsqu'il est difficile de garder les mains sur la poignée. Disponible uniquement en version Exclusive.



Sangle universelle
Une sangle élastique solide aux multiples usages.

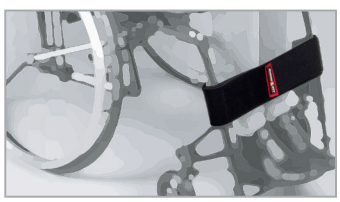

Sangle thoracique
Elle offre un maintien souple qui évite tout frottement sous les aisselles.



Support Blue - Hygiène
Une grande partie de la gamme de positionnement existe en bleu, adaptée par ex. aux chaises de douche et de toilette.



Ceintures de bassin
- Pour positionner le bassin

La ceinture de bassin est essentielle pour la sécurité et pour garantir que l'utilisateur est correctement positionné dans le fauteuil roulant ou le système d'assise. Le positionnement de l'utilisateur est important pour la rééducation et le traitement. Une ceinture de bassin peut être au moins aussi importante qu'un coussin anti-escarres. Notre gamme de ceintures fixe le bassin dans la bonne position et limite le cisaillement, et donc les pressions inutilement élevées sur le coccyx et les tubérosités ischiatiques. Nous proposons trois ceintures de bassin :



- **Sittbelt Comfort**

  Une ceinture de bassin simple, souvent utilisée sur les fauteuils de confort. Elle a deux sangles de fixation et existe en plusieurs tailles selon la largeur des hanches. Différentes boucles sont proposées selon les besoins et les souhaits. Les ceintures ont deux coussinets, fixés aux sangles ou flottants (amovibles). Les coussinets sont cousus dans la matière confortable Soft.


Sittbelt comfort

- **Sittbelt**

  Souvent utilisée sur les assises / systèmes d'assise et les fauteuils roulants plus évolués. Convient à tous les utilisateurs, assure un bon positionnement et limite le cisaillement. Elle a quatre sangles et existe en plusieurs tailles selon la largeur des hanches. Différentes boucles sont proposées selon les besoins et les souhaits. Les ceintures ont deux coussinets, fixés aux sangles ou flottants (amovibles). Les coussinets sont cousus dans la matière confortable Soft.


Sittbelt

- **Ceinture anti-rotation**

  Fréquemment utilisée sur les assises / systèmes d'assise. Offre un positionnement important et limite le cisaillement et la rotation du bassin. Elle a quatre sangles et existe en plusieurs tailles selon la largeur des hanches. Les coussinets sont fixés aux sangles et existent en matière Soft ou gel pour un confort optimal.



Anti-rotational belt

Boucles

Les ceintures de bassin sont équipées de différentes boucles selon l'utilisateur et le sens de traction / serrage souhaité. Certaines boucles ont un capot de protection contre l'ouverture involontaire.



Harnais thoraciques
- Pour un meilleur contrôle postural

Un bon contrôle postural améliore le contrôle de la tête et favorise l'activité et la vigilance. Nous pouvons à la fois corriger et maintenir la position du tronc selon la situation de chaque utilisateur.





HARNAIS H
Le harnais H maintient les épaules et le thorax. Il limite la rotation et convient en cas de besoin d'une bonne extension du thorax et des épaules. Convient aussi avec sonde PEG / bouton.



APPUI STERNAL
Notre appui sternal offre un maintien confortable du thorax et un appui concentré sur le sternum. Spécialement conçu pour les utilisateurs dont le thorax tombe vers l'avant.



HARNAIS THORAX
Le harnais thorax est conçu pour les utilisateurs à faible tonus musculaire. Il aide au positionnement en soulevant depuis le bas du dos.



SANGLE D'ÉPAULE AVEC TUBE
Nos sangles d'épaule sont bien rembourrées et se règlent facilement, avec de nombreuses possibilités. Elles peuvent positionner un seul côté du haut du corps, par ex. lorsque les épaules ne sont pas parallèles.



SANGLE THORACIQUE
La sangle thoracique a un large rembourrage et deux points de fixation.



HARNAIS THORAX
Le harnais thorax est conçu pour les utilisateurs à faible tonus musculaire. Il aide au positionnement en soulevant depuis le bas du dos.

⚠ **Toujours combiner un harnais avec une ceinture de bassin.**

Maintien de cheville
- évite la supination et la pronation indésirables

Le maintien de cheville offre un appui stable qui évite la supination et la pronation indésirables du pied. Il se monte sur différents repose-pieds et existe en quatre tailles selon les dimensions de la cheville. Fermeture par boucle ou velcro.





Maintien de cheville à trois points de fixation, fermeture à boucle



Maintien de cheville à trois points de fixation, fermeture velcro



Maintien de cheville basic avec fermeture velcro



Sangle de pied
- pour positionner le pied

Une façon simple de positionner les pieds. Se fixe sur la palette. Avec ou sans rembourrage. Notre sangle de pied basic a une largeur de 25 mm, nos sangles rembourrées une largeur de 20 mm. Longueur de sangle au choix : 45 ou 60 cm. Fermeture velcro ou à boucle. Choisir le modèle et la taille selon le besoin et la longueur de sangle. La matière est notre nouveau Soft-Skai, facile à essuyer à l'extérieur et doux à l'intérieur.





Sangle de pied velcro



Sangle de pied rembourrée, velcro



Sangle de pied rembourrée, boucle

Bracelet
- évite l'hyperextension

Le bracelet se monte en diagonale pour éviter l'hyperextension, afin que les bras ne tombent pas hors du système d'assise ou du fauteuil roulant. Grâce à une bande élastique dans la sangle de fixation, le risque de blessure de l'utilisateur et d'endommagement du produit diminue. Le bracelet existe en trois tailles, choisies selon le tour de poignet (S = 13 cm, M = 17 cm, L = 21 cm). Il est réalisé en Soft-Skai (Skai à l'extérieur, Soft côté corps).








Similar product is available in blue

Manchette de main
- pour une meilleure prise

La manchette de main s'utilise lorsqu'il est difficile de garder les mains sur la poignée. Elle se met très facilement, sans que l'utilisateur ait à y glisser la main : on l'enroule simplement lorsque l'utilisateur tient déjà la poignée, comme le montre la série d'images ci-dessous. Elle existe en trois tailles, convient à la main droite comme à la gauche et se vend à la pièce.






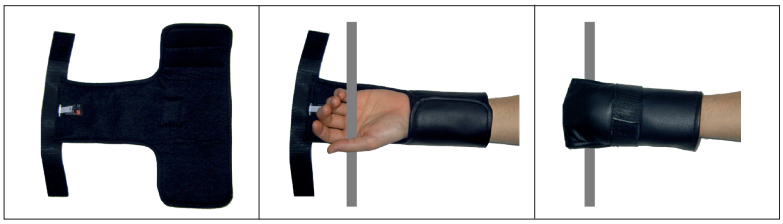

Sangle universelle
- sangle souple

Une sangle élastique solide aux multiples usages : maintien autour des hanches, des cuisses ou des jambes, du thorax ou au-dessus du ventre. Elle se raccourcit facilement selon le besoin. La sangle universelle Anatomic se fixe en continu par velcro. Ce velcro, composé de petits crochets fins, accroche moins les vêtements et reste facile à nettoyer ; la fixation est extrêmement solide dans le sens de traction. La sangle existe en deux longueurs (145 et 225 cm) et trois largeurs (9, 12 et 15 cm), au choix selon les besoins.

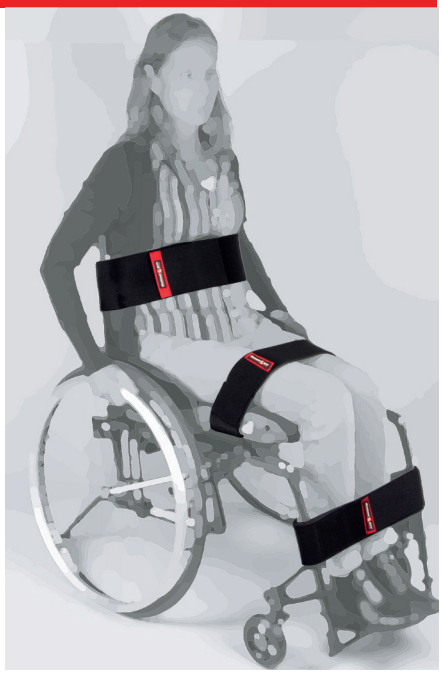



Support Blue
- adapté aux chaises et sièges d'hygiène

Les produits de la gamme bleue existent dans un nombre limité de modèles et sont destinés aux chaises et sièges d'hygiène.





Accessoires de fixation
- pour fixer solidement ceintures et harnais

Nous avons développé plusieurs kits de fixation pour les ceintures de bassin et les harnais. Ils s'utilisent sur nos systèmes d'assise et châssis, mais aussi sur d'autres fauteuils roulants du marché. Toutes les variantes figurent dans le guide de commande.



Fmk® - Support entre les poignées de poussée

Le FMK est un kit de fixation universel qui facilite le montage du harnais et de l'appui-tête. Il se fixe autour des poignées de poussée ou des tubes de dossier du fauteuil roulant et donne aussi le bon sens de traction aux harnais de positionnement.

Des tiges de rehausse à utiliser avec le FMK existent pour les sangles de 25 mm et de 40 mm. Le support d'appui-tête est inclus de série. Le FMK se démonte sans outil.



Anatomic SITT

RehaPro

Distributeur pour la Suisse
Route de Jussy 38c, CH-1226 Thônex
Tél. +41 78 247 66 33
E-mail info@rehapro.ch
Web www.rehapro.ch

2022-12-08